



UV-B Narrowband PL-L/PL-S

PL-S 9W/01/2P 1CT/6X10BOX

Over 400 uavhengige kliniske studier har dokumentert av UVB-smalbånd PL-L-/PL-S-lyskildene er tryggere og mer effektive enn andre lyskilder i sin klasse. PL-L-/PL-S-versjonene gir systemprodusentene stor designfrihet, siden disse lyskildene tar mindre plass og har én sokkel. Ytterligere fleksibilitet oppnås som følge av at de bruker de samme soklene som allmenne belysningskilder og de samme universalforkoblingene. Den klassebeste behandlingseffektiviteten er et resultat av den svært smale båndbredden: emisjon mellom 305 og 315 nm med en topp på 311 nm. Dette er den mest effektive båndbredden for behandling av psoriasis, og er derfor betydelig mer fokusert. Et resultat av dette er at eksponeringstidene er mye kortere, og dette fører videre til en reduksjon av bivirkninger som rødhet i huden og kløe. Alt dette gjør dem perfekte for fototerapibehandling av lidelser som psoriasis, parapsoriasis, vitiligo, atopisk dermatitt og mycosis fungoides. I tillegg er disse lyskildene egnet for behandling i hjemmet, siden den totale doseringen av denne smalbåndstrålingen kan kontrolleres nøyte.

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskildefeste	G23 [G23]
Hovedbruksområder	Phototherapy
Levetid til 50 % lystap (nom.)	1000 h
Bruktid (nom.)	1000 h
Teknisk belysning	
Fargekode	01
Fargebetegnelse	UV-B
Svekkelse ved 500 timer	15 %
Svekkelse ved 1000 timer	20 %

Drift og elektrisk	
Power (Rated) (Nom)	8.6 W
lyskildestrøm (nom.)	0.17 A
Spennning (nom.)	60 V
Mekanisk og innfatning	
Informasjon om lyskildefeste	2 Pins (2P)
UV	
UV-B-stråling 100 t (IEC)	1.0 W
UV-B-stråling 5 t (IEC)	1.2 W

UV-B Narrowband PL-L/PL-S

Produktdata


Fullstendig produktkode	871150086891680
Produktnavn for bestilling	PL-S 9W/01/2P 1CT/6X10BOX
EAN/UPC – produkt	8711500868916
Bestillingskode	86891680
Ei-nummer	3861613

Teller – antall per pakke	1
Teller – pakker per utvendige boks	60
Materialenr. (12NC)	927901700121
Nettovekt (stykk)	32.000 g

Warnings and safety

- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.



Målskisse

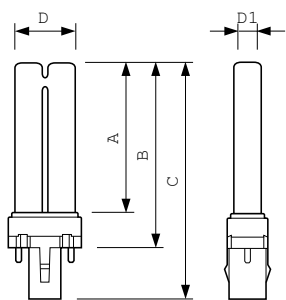

PL-S 9W/01/2P

Product	D1 (max)	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
PL-S 9W/01/2P 1CT/6X10BOX	13 mm	28 mm	129 mm	144.5 mm	167 mm

Fotometriske data

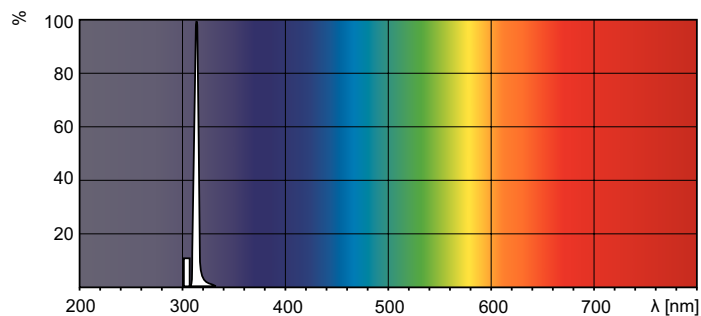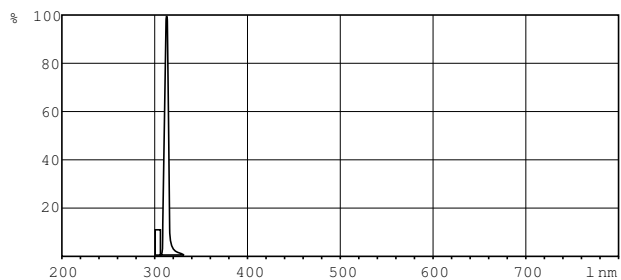

Fargekode /01

UV-B Narrowband PL-L/PL-S

